

TF ADAPTIVE

Secção triangular

Indicação

Para uso em canais extremamente curvos.




Sistema intuitivo, com cores projetadas para garantir facilidade de uso e eficiência, como um sinal de trânsito. As limas TF Adaptive têm força superior (duas a três vezes mais resistentes à fadiga cíclica do que qualquer lima de NiTi) e flexibilidade (70% mais flexível que outras limas de NiTi), enquanto mantém alta durabilidade, confiança para tratar canais extremamente curvos, sem o medo de a lima fraturar, tornando o procedimento mais rápido do que nunca.

Lima torcida: elimina microfaturas do metal, proporcionando mais resistência para a lima.

Possui tratamento de superfície: mantém a integridade das arestas de corte por mais tempo.

Tecnologia das limas: TF com sistema de codificação por cores.

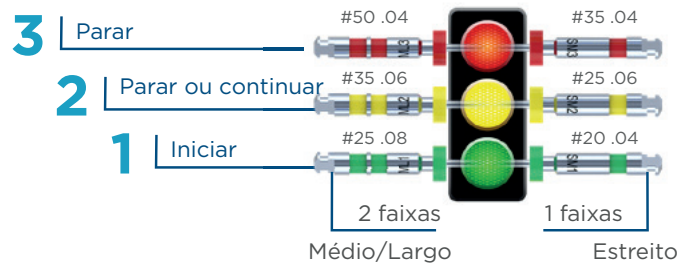

Composição básica

Torcida em níquel e titânio.

Apresentação

Para canais médio/grande (faixa dupla):

- **Caixa sortida com 3 K-Files e 3 TF Adaptive Pacote 23mm**
K-Files: .08/25mm .10/25mm .15/25mm
TF Adaptive: .25/.08 23mm .35/.06 23mm .50/.04 23mm

Pacote 27mm

Files: .08 25mm .10 25mm .15 25mm
TF Adaptive: .25/.08 27mm .35/.06 27mm .50/.04 27mm

• Reposição com 4 unidades

Verde: .25/ .08 /23mm ou .25/ .08 /27mm
Amarelo: .35/ .06 /23mm ou .35/ .06 /27mm
Vermelho: .50/ .04 /23mm ou .50/ .04 /27mm

Para canais pequenos (faixa única):

- **Caixa sortida com 3 K-Files e 3 TF Adaptive Pacote 23mm**
K-Files: .08/ 25mm .10 /25mm .15/ 25mm
TF Adaptive: .20/.04 23mm .25/.06 23mm .35/.04 23mm

Pacote 27mm

K-Files: .08/25mm .10/25mm .15/25mm
TF Adaptive: .20/.04 27mm .25/.06 27mm .35/.04 27mm

• Reposição com 4 unidades

Verde: .20/ .04 / 23mm ou .20/ .04 / 27mm
Amarelo: .25/ .06 /23mm ou .25/ .06 /27mm
Vermelho: .35/ .04 /23mm ou .35/ .04 /27mm